

NORDIC Tables er i overensstemmelse med kravene i Rådets direktiv 2017/745 om medicinske produkter klasse I


DK - Styling af modtager

Hvis pakken er blevet beskadiget, skal dette dokumenteres på modtagelsesdokumentet Kontroller, at alle dele er til stede. Manglende dele skal straks rapporteres til leverandøren. Følg monteringsvejledningen ved montering.

DK - Dele: Toiletsæde er en sliddel og er ikke inkluderet i garantien!

1x Holder, 1x Toiletsæde, 2x Holder til sæde, **4x** Skive – plast, 2x Skive – stål, 2x Sommerfuglemøtrik 2x Armlæn (venstre+højre)

Montage - Montering – Montage

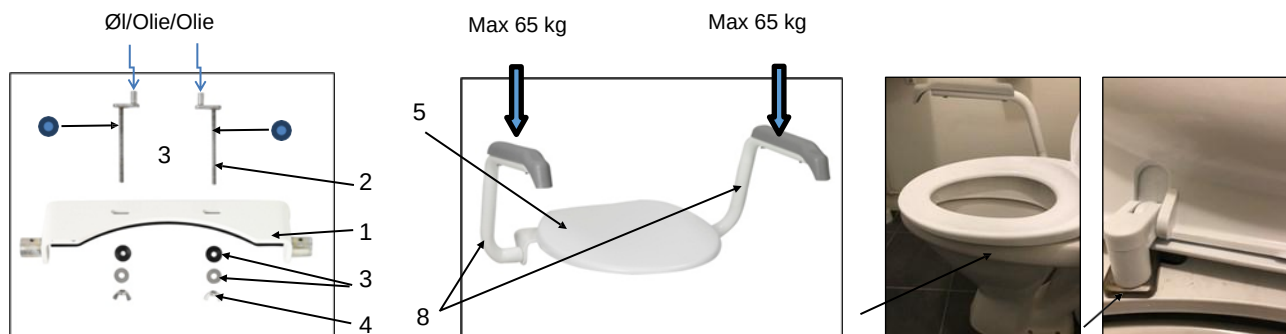

1. Placer beslaget over toiletkummen
2. Lågholder gennem beslag og toiletstol
3. Skub på plast/stålskiver
4. Skru vingemøtrikken lidt på
5. Tag brillerne på (kom en dråbe olie på keglerne inden montering) Juster brillerne
6. Spænd vingemøtrikkerne hårdt
7. Fastgør armlænen til højre og venstre, skruhovedet skal være i sporet!
8. Kontroller stabiliteten før påføring

1. Pladsholder på toiletkummen
2. Sædeholder gennem holder og toilet
3. Placer skive (plast/stål)
4. Let stramning med sommerfuglemøtrik, ikke for hårdt!
5. Placer sædet (oliedråbe på stifterne før tilpasning) juster plastiksædet.
6. Tilspænding med sommerfuglemøtrikkerne hårdt
7. Monter armlænen til venstre og højre (hovedet skal være i sporet!)
8. Kontroller stabiliteten før brug

1. Placer holderen over toiletsædet
2. Lågholder gennem holder og toiletsæde
3. Skive (plast/stål) sted
4. Spænd nemt med vingemøtrik
5. Sæt sædet på (en dråbe olie på studsene før montering) og peg ud mod toiletsædet
6. Spænd vingemøtrikkerne stramt
7. Monter armlænen til højre og venstre, skruhovedet skal være i rillen!
8. Kontroller stabiliteten før brug

DK - Skruforbindelser skal kontrolleres før brug. Maks. belastning må ikke overstige 130 kg. Defekte dele skal udskiftes med det samme (brug kun originale NORDIC dele). OBS, bevægelige dele, risiko for fastklemning! Installationen bør kun udføres af en professionel. En planlagt inspektion med 6 måneders mellemrum anbefales. Svejsede og boltede samlinger. Hvis der opdages skader eller revner, skal disse dele udskiftes før den nye brug.

DK - Før brug skal du kontrollere alle skruforbindelser. Maks. vægt 130 kg må ikke overskrides. Ødelagte dele skal udskiftes med det samme (brug kun originale NORDIC reservedele). Opmærksomhed! Bevægelige dele, risiko for klemning. Installationen bør kun udføres af en kvalificeret person. En planlagt inspektion med 6 måneders mellemrum anbefales. Inspektion af svejsede og boltede forbindelser. Ved opdagelse af beskadigelse eller revner skal disse dele udskiftes før den nye brug.

DK - Kontroller alle skruforbindelser før brug, og den maksimale belastning på 130 kg må ikke overskrides. Beskadigede dele skal udskiftes med det samme, kun originale NORDIC reservedele bør bruges. NB! Bevægelige dele, knusningsrisiko! Installationen skal udføres af en autoriseret person. En planlagt kontrol med 6 måneders mellemrum anbefales. Inspektion af svejse- og skruforbindelser. Hvis der opdages skader eller revner, skal disse dele udskiftes før ny brug.

Teknisk information / Teknisk information / Teknisk information

DK - Total bredde: 640 mm (mellem 540 mm), sæde med hulbredde c/c 120 - 160 mm, maks. belastningsvægt: 130 kg, højde armlæn fra toiletsæde 225 mm

Nordisk aktivitet
AB Lokegatan 5
SE-263 37 Höganäs

e-mail
info@nordicactivity.se
nordic@nordicactivity.se

Hjemmeside:
www.nordiccare.de
www.nordicactivity.com
www.nordicactivity.se