



Brugervejledning

Læs brugervejledningen før du tager din el-kørestol i brug



888WNLD

Indhold

Introduktion	1
Funktioner	2
Råd om sikkerhed	3
Justering og indstilling	5
Kom godt i gang med at køre	9
Frihjulsfunktion	10
Mærkater og advarsler	11
Kom i gang med at køre på din el-kørestol	12
Tips til betjeningen af din el-kørestol	13
Batterier og batteriopladning	14
Vedligeholdelse	16
Fejlfinding	17
Lås/oplåsning af styreenhed	19
EMI advarsel	20
Tekniske specifikationer	22
Ansvarsfraskrivelse	23
Kontakt	24



Introduktion

Tillykke med din nye Shoprider® el-kørestol. Din Shoprider® el-kørestol er innovativ og har et patenteret design. El-kørestolen er perfekt til steder, hvor der ikke er megen plads, både indenfor og udenfor. Transaksler og elektromagnetiske bremses gør, at el-kørestolen kører sikkert og effektivt. Denne Shoprider® el-kørestol er designet til personer, der har en funktionsnedsættelse.

Læs venligst denne Brugervejledning omhyggeligt, før du bruger din el-kørestol og vær sikker på, at du forstår alle instruktionerne.

FUNKTIONER

1. Hovedstøtte (justerbar højde).
2. Armlæn (justerbar bredde, vinkel og højde(Kan vippe op, så ind- og udstigning lettes).
3. Joystick (indbygget i armlænet) & Controller (indbygget i chassiset)
4. Stik til oplader
5. Luksus førersæde med indstilleligt ryglæn
6. Fodhviler
7. Forreste styrehjul
8. Bageste styrehjul
9. Forlygte
10. Sikkerhedshjul



Figur 1

RÅD OM SIKKERHED

- Medtag aldrig passagerer.
- Dette produkt er beregnet til at kunne støtte og hjælpe dig. For din egen sikkerheds skyld beder vi dig derfor læse brugervejledning, før du tager el-kørestol i brug. Hvis du er i tvivl, bedes du kontakte din leverandør.
- Må ikke bruges på stigninger over 9 grader (15% hældningsgrad).
- Hvis din vægt overstiger el-kørestolens vægt, skal du sætte farten ned, når du drejer.
- Stå ikke på eller af el-kørestol, medmindre bremsen er aktiveret og el-kørestolen er slukket.
- Sluk ikke el-kørestol under kørsel.
- Kør ikke på el-kørestol, hvor det ikke er lovligt eller sikkert at gå.
- Kør ikke over kanter, der er højere end 38 mm. El-kørestolen kan vælte og dermed forårsage personskader eller skader på el-kørestol. Skal du køre over kanter, der er højere end 38 mm, skal du holde el-kørestolen i en 90 graders vinkel og ved lav hastighed.
- Undlad at drikke eller tale i mobiltelefon, når du kører på din el-kørestol.
- Overskrid ikke den vejledende brugervægt. En overskridning af den vejledende brugervægt kan forårsage personskade, og reklamationsretten bortfalder.
- Hold altid dine fødder på el-kørestolen, når du kører.
- Vær sikker på, at du er fysisk i stand til at køre el-kørestol. Kontakt din læge, hvis du er i tvivl.
- Sænk altid farten og kør forsigtigt på ujævne underlag.
- Har du balanceproblemer, skal du øve dig i at så af og på el-kørestol sammen med sundhedspersonale.
- Kør ikke på el-kørestol uden antitip-hjul monteret.
- Kør ikke på rulletrapper med el-kørestol. Der kan ske alvorlige skader.
- Kør ikke el-kørestol på stigninger, hvorpå der er olie, vand eller is.
- Løft ikke el-kørestol i sædet, styret, den bageste del af karrosseriet eller i nogen af de aftagelige dele. Det kan forårsage personskade eller skade på el-kørestol.
- Anvend ikke uoriginale dele eller udstyr, som ikke er godkendt af producenten.
- Fjern nøglen fra tændingen, før du står på eller af el-kørestol. Dette sikrer, at el-kørestol er slukket og ikke kan køre af sig selv. Generelt skal nøglen altid fjernes fra tændingen, når el-kørestolen ikke er i brug. Dette vil forhindre uøvede eller uautoriserede personer i at køre den.
- Forbind ikke andre komponenter til el-kørestolens batteri eller ladestik. Dette kan forårsage personskade samt skade på komponenten eller el-kørestolen.
- Vær sikker på, at styret er korrekt justeret og låst for at undgå personskade eller skade på el-kørestol.
- Det er ikke tilladt at sidde på el-kørestol under transport med et andet køretøj. Dette kan forårsage skader.
- Brug ikke el-kørestol, når det regner eller i nærheden af en bruser eller i et fugtigt badeværelse. Regn eller fugt kan forårsage funktionsfejl i el-kørestolens elektriske system, og el-kørestol kan ruste.
- Læn dig ikke op af styret og træk ikke i styret, når du står af eller på el-kørestol. Dette kan forårsage skader.
- Betjen ikke el-kørestol og tænd ikke el-kørestolen, mens den lader.
- Hvis en af hjulboltene løsner sig, skal den udskiftes med en ny fra en autoriseret leverandør og fastspændes med et tilspændingsmoment på 240 ± 5 kg-cm sammen med Loctite 271 låsevæske (el. lign.).

(Fortsat fra forrige side)

- Oplad batterierne dagligt efter brug.
- Fjern laderen fra el-kørestol efter opladning.
- Der må ikke være løse ledninger under kørslen.
- Tjek resterende batteritid inden kørsel.
- Oplad altid batterierne i ventilerede omgivelser.
- Hvis el-kørestol er kørt igennem eller er sunket ned i dybt vand, skal du slukke for strømmen og kontakte din autoriserede Seniorland forhandler for afhjælpning.
- Sluk el-kørestol, når den ikke er i brug og før opladning, samt inden fjernelse og isætning af batterier, da der ellers kan ske skade på el-kørestolen eller andre ting i nærheden.
- Brugen af el-kørestol må ikke overskride specifikationerne i denne brugervejledning.
- Brug ikke den fingerbetjente hastighedsregulering før du har tændt el-kørestol, da du ellers vil være nødt til at slukke og tænde el-kørestol igen, før den kan betjenes.

Justeringer og indstillinger

Sædet og armlænene

Sædet er komfortabelt, stilfuldt og stabilt. Dit sæde har indstilleligt ryglæn. Armlænene kan vippes op, så ind- og udstigning lettes. Armlænene har indbygget højdejustering, så du kan indstille det, så det er mest komfortabelt for dig. Sædet er beklædt med holdbart, gråt vinyl, som er meget komfortabelt og stilfuldt.

Figur 2



Figur 3

Justering af bredden mellem armlænene

Under den bageste del af sædet er der to drejeknapper, én på hver side. Løsn drejeknappen og skub hvert armlæn udad. Spænd knappen igen, når den ønskede position er fundet.



Din kørestol skal altid være sat i kørselstilstand. Frihjulsfunktionen skal kun bruges, hvis det er strengt nødvendigt at skubbe kørestolen, som f.eks. hvis den skal skubbes ud fra et sted, hvor der er ringe plads. Følg mærkatens anvisninger og skub håndtagene i retning mod føreren af kørestolen.

Højde (B)

Træk splitten, der er placeret på bagsiden af


fodhvilerens gliderør, ud, og indstil fodhvileren til den ønskede højde. Der er mulighed for indstilling af tre højder. Sæt splitten i det korrekte hul og sikr dig, at splitten går igennem på den anden side af røret.

FLYTNING AF JOYSTICK (højre til venstre til højre).

Løsn drejeknappen [Fig.2 (3)] og flyt hele armlænet, hvor joysticket sidder. Placer armlænet på den ønskede side. Spænd knappen til.


JUSTERING AF SÆDEHØJDE (Fig.4)

Frakobl ledningen fra joysticket på bagsiden af stolen ved at trykke på palen med din venstre hånd og trække i stikket med din højre hånd. Fjern sædet ved at løsne håndtaget. Sædepindens højde kan indstilles i to højder. Sædehøjden justeres ved at spænde den sekskantede bolt og møtrikken i et af de to huller. Dette gør ligeledes, at sædepinden fastgøres til karrosseriet. Sikr dig, at alle forbindelser er spændt, før du kører.

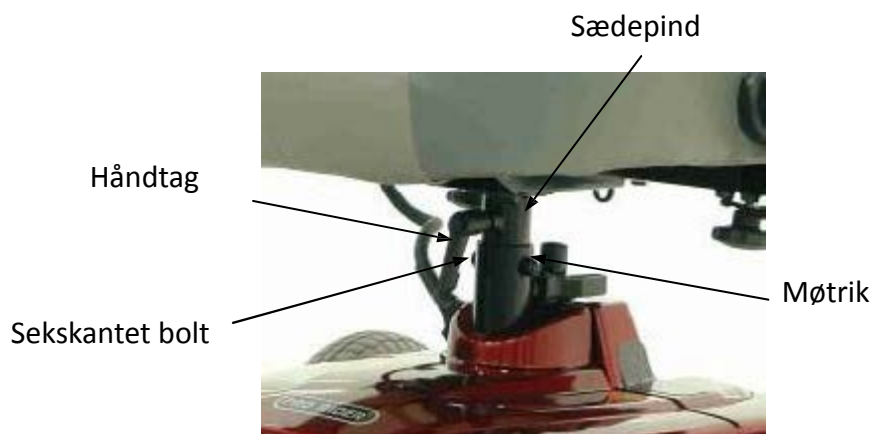

Figur 4

Joystick

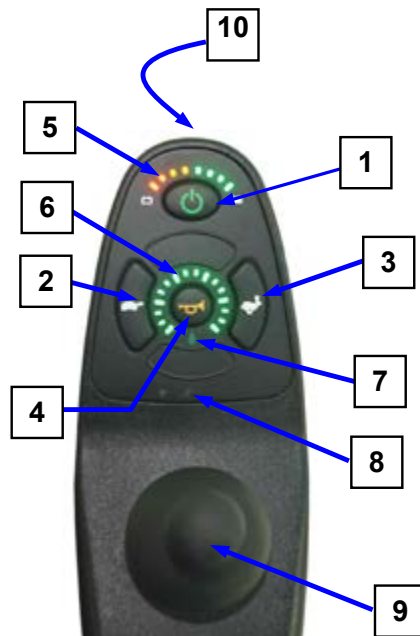

Tænd/sluk knap (1)

Denne knap tænder og slukker joysticket. Brug ikke denne knap til at stoppe kørestolen under kørsel, med mindre der er opstået en nødsituation.

Deceleration knap (2)

Knap til at sænke hastighed.

Acceleration knap (3)

Knap til øge hastighed med.

Horn (4)

Knap vist med et horn.

Batterimåler (5)

Batterimåleren viser dig, at kørestolen er tændt. Den viser også kørestolens driftstilstand i 8 niveauer. Skulle der være en fejl i kørestolens elektriske system, vil du også kunne se det på displayet. Se tabel 1 for yderligere information.

Hastighed indikator (6)

Der er 5 niveauer at vælge imellem i displayet, som viser den maksimale hastighed der er valgt.

Ledsager kontrol LED (7)

Når ledsager styring er aktiveret, vil ACU LED lyse, dette vil den indtil ledsager skifter tilbage til bruger mode.

Service indikator LED (8)

Amber service LED indikator viser fejlkoder ved blink. Se tabel 1 for liste over mulige fejlkoder.

Joystik (9)

Dette styre din hastighed og retning på elkørestolen. Skub joysticket i den retning du vil køre. Jo mere du skubber, des hurtigere vil hastigheden være. Slippes joysticket vil det automatisk udløse bremsene og elkørestolen vil stoppe.

Laderstik (10)

Du må kun tilslutte den originale oplader. Laderstikket på joysticket må ikke bruges til andre elektriske apparater. Tilslutning af øvrige elektriske apparater kan skade joysticket og påvirke kørestolens elektriske system.



KOM GODT I GANG MED AT KØRE

TRIN 1

Tryk på tænd/sluk knappen på joysticket. Batteriet aktiveres og batterimåleren blinker i få sekunder.

TRIN 2

Tryk på hastighedsreguleringsknappen og find en passende hastighed, hvor du let kan manøvrere kørestolen.

NB! Kørestolen kan ikke køre og batterimåleren vil blinke, hvis du skubber til joysticket, før eller lige efter du har tændt det. For at rette op på det, skal du slippe joysticket og lade det komme tilbage til midterpositionen. Slipper du ikke joysticket i løbet af fem sekunder, vil batterimåleren blinke hurtigt. Sluk og tænd joysticket.

TRIN 3

Skub joysticket for at styre kørestolens hastighed og retning.

NB! Vælg et område, hvor der er godt med plads, når du skal køre på kørestolen første gang. Sæt hastigheden lavt, indtil du er fortrolighed med funktionerne. Snart vil du kunne styre kørestolen og du kan gradvist sætte hastigheden op.

TRIN 4

Slip joysticket, når du vil stoppe.

Frihjulsfunktion

Hvis der opstår en fejl eller batteriet svigter, kan de elektromagnetiske bremser kobles fra, så kørestolen kan skubbes. Håndtagene skal skubbes over på frihjulspositionen. På kørestolens mærkater er der anført "Engaged" (tilkoblet) og "Disengaged" (frakoblet).

NB! Brug ikke og sid ikke på kørestolen, når bremserne er frakoblet, idet joysticket ikke fungerer normalt. Efterlad aldrig el-kørestolen i frihjulsposition.

Frihjulshåndtag ****NB**** Der er også et håndtag på modsatte side




Mærkat, der viser, om bremserne er låst eller ulåst.


Mærkater og advarsler



Advarselsmærkat

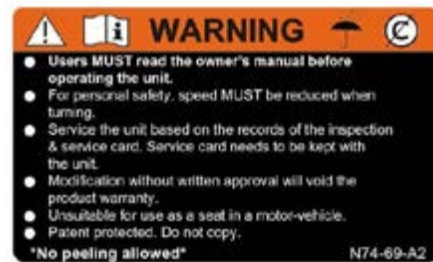

Advarselsmærkat

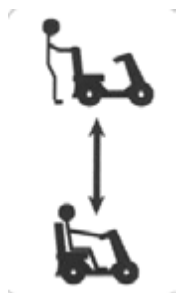

Friejuls symbol

Kom i gang med at køre på din el-kørestol

Kom godt i gang

- Vælg et plant område med masser af plads.
- Sæt dig på el-kørestolen, enten ved at løfte armen og glide ind på sædet eller ved at dreje sædet udad og efterfølgende dreje sædet tilbage, så det er lige ud for styret.
- Juster styret og sædet som tidligere anvist.

Begynd at køre

- Vær sikker på, at du sidder godt.
- Drej nøglen, så den står på ON.
- Hastighedsregulering bør stå på 1 eller 2.
- Tryk den fingerbetjente knap ved din højre hånd ned, og el-kørestolen vil langsomt bevæge sig fremad. Jo hårdere du trykker, jo hurtigere kører el-kørestolen. Dog når den kun op på det maksimale hastighedsniveau, du selv har valgt.
- Slip knappen, og el-kørestolen vil stoppe langsomt, og den magnetiske bremse bliver aktiveret.

At styre

Det er let at styre el-kørestolen. Du skal sikre dig, at du har plads nok, når du skal dreje, således at hjulene ikke støder på noget undervejs. Når du skal styre igennem snævre åbninger, så som døråbninger, eller når du skal vende, skal du vende styrets håndtag mod det sted, du vil hen og langsomt give gas. El-kørestolen drejer meget skarpt, men kører stadig fuldstændigt stabilt, så længe farten ikke er for høj.

At bakke

Før du bakker, skal du sikre dig, at der ikke er forhindringer i området bag dig. Indstil til lav hastighed, før du begynder at bakke. Tryk på den venstre fingerbetjente knap og styr uden om hjørner og forhindringer.

At stå af

Før du står af el-kørestolen, skal du sikre dig, at nøglen er drejet til OFF.

FORSIGTIG: Vær forsigtig, når du står af eller på el-kørestolen og sikrer dig, at hverken styr eller fodhviler anvendes som støtte.

Tips til betjening af din el-elkørestol

Opkørsler og ramper

Stabiliteten i din el-kørestol er styret af flere faktorer, så som sædepositionen, hældningsvinkel samt din højde og vægt. Når du nærmer dig en stigning, skal du gøre det direkte på – aldrig i en skæv vinkel. Undgå desuden at dreje undervejs. Når du skal ned af en rampe eller nedkørsel, skal du sætte hastighedsregulatoren lavt. Det vil sikre, at du får en sikker og kontrolleret nedkørsel. Når du slipper fingerbetjente knapper, vil elkørestolen bremse langsomt.

Sikker opkørselsvinkel


Følg altid retningslinjerne for, hvordan vinklen skal være, når du kører op af en rampe eller opkørsel, se figur 8.

Forsigtig – sluk aldrig når elkørestolen er i bevægelse

Græs og grus

Hvis du følger de retningslinjer, vi har givet dig, vil din el-kørestol klare mange forskellige underlag. Dog bør du undgå højt græs, løst grus og sand.

NB: Undgå at bruge el-kørestolen, når det regner eller på våde underlag. Det kan få motoren til at sætte ud.

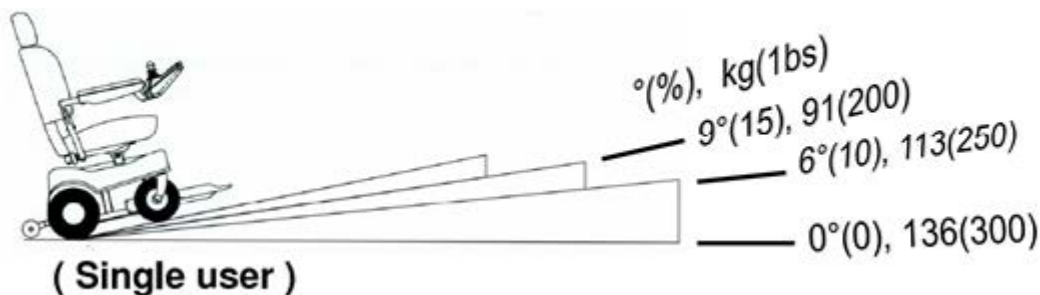

Her vises vinkler og vægt for denne elkørestol for at illustrere, hvad der er sikkert for både bruger og udstyr. Hvis disse parametre ikke overholdes, kan elkørestolen blive usikker og få problemer med det elektriske system.

Batterier og batteriopladning

Shoprider® el-kørestolen er forsynet med vedligeholdelsesfrie, lukkede blybatterier. Batteriernes præstation kan påvirkes af temperatur, underlag, batteriets tilstand, batteritypen, batteriopladertypen, brugerens vægt, vindhastighed, osv. Batteri-indikatoren er kun vejledende og er mest effektiv, når el-kørestolen kører – det korrekte niveau vises kun under kørsel.

- Når el-kørestolen stopper, kan batteri-indikatoren vise, at den er fuldt opladet.
- En aktiv bruger kan bruge op til 30% af batterikapaciteten eller mere pr. dag.
- Inaktive brugere bruger måske kun 50% af batterikapaciteten på en uge.
- I begge tilfælde bør batteriet oplades over natten.
- Udskift altid batterierne med to identiske batterier med samme kemi, amperetimer og kapacitet. Batterierne skal udskiftes sætvis og på samme tid, og altid af din autoriserede Seniorland forhandler.

Batterioplader

Den leverede batterioplader er kun egnet til din el-kørestol og kan ikke anbefales anvendt på andre produkter. Brug kun den lader, der er leveret sammen med din el-kørestol. Andre typer ladere kan gøre permanent skade på din el-kørestols batterier og vil medføre at reklamationsretten bortfalder. For al øvrig information omkring laderen og instruktioner om drift og brug, henviser vi til den brugervejledning, der ligger i den kasse, som laderen blev leveret i.

Første gang du bruger el-kørestolen

Før du bruger din el-kørestol første gang, skal du lade batterierne helt op (se afsnittet om opladning). Opladning kan tage op til 12 timer. Når du lader batterierne fuldt op, inden du bruger el-kørestolen første gang, vil batteriernes ydeevne højnes. I modsat fald kan det forårsage skader.

Opladning

For at oplade batterierne skal du forbinde det trebenede hanstik med det trebenede hunstik på batterikassen. Tilslut vekselstrømsledningen i stikdåsen og den anden ende i laderen (tobenet).

Se venligst beskrivelsen af batteri-indikatoren, som er baseret på ladestatus, i brugervejledning. Når batterierne er fuldt opladede, skal du tage stikket ud af stikdåsen og det trebenede stik ud af batterikassen.

ADVARSEL: Brug kun original og godkendt Shoprider® lader!

Denne lader må kun bruges indendørs. MÅ IKKE udsættes for regn eller fugt. Lad ikke laderen sidde i el-kørestolens ladestik, hvis laderen ikke er tilsluttet stikkontakt.

Batteri-information

1. Bland ikke forskellige batterier og ledninger. De to batterier skal være ens, når de tilsluttes.
2. De to batterikasser skal tilkobles samtidigt og installeres korrekt på elkørestolen før kørsel eller opladning.
3. Oplad nye batterier 100%, inden brug.
4. Det anbefales at oplade batterierne 8-14 timer efter dagligt brug.
5. Hvis elkørestolen ikke bruges så ofte (én gang om ugen eller mindre), skal batterierne lades op én gang om ugen i 12-14 timer.
6. Oplad ikke batterierne i mere end 24 timer per gang.
7. Batterier, som kommer under minimumsspændingen, fordi de ikke bliver ladet op, kan ikke genoplades igen.
8. Hvis du planlægger ikke at bruge din elkørestol i en længere periode, anbefales det, at du lader batterierne helt op og efterfølgende afmonterer batterierne før opbevaring. Opbevar elkørestolen et tørt og varmt sted. Opbevar aldrig batterierne, hvor der er risiko for ekstreme temperaturer. Forsøg aldrig at lade et frossent batteri op. Et koldt eller frossent batteri bør varmes op i adskillige dage, før det kan oplades.

Vedligeholdelse

Smøring

Følgende dele bør smøres med en let olie el. lign. smøremiddel hvert halve år:

- Sædepindens drejeaksel.
- Sædejusteringen.
- Hjullev.
- Drivaksel

FORSIGTIG – ANVEND IKKE WD40 TIL SMØRING AF DELE!! SMØR IKKE TRANSAKSELEN/GEARKASSEN! Får du problemer, bedes du kontakte din Seniorland forhandler.

Rengøring

Din el-kørestol bør rengøres efter behov, men som med alt andet elektrisk udstyr, skal du være yderst forsigtig med brug af vand, således at du ikke beskadiger el-kørestolens følsomme dele.

Læs følgende advarsler:

- Brug kun en blød, fugtig klud.
- Brug aldrig en vandslange til at rengøre din el-kørestol med.
- Brug kun milde rengøringsmidler.

Dæk

Din el-kørestol leveres med punkterfri massive dæk???

Fejlfinding

Hovedafbryder

Din el-kørestol er udstyret med det nyeste inden for elektroniske styresystemer, som er programmerede til at beskytte det elektriske system fra u hensigtsmæssig overbelastning. Som en ekstra sikkerhed har el-kørestolen en hovedafbryder. Hvis din el-kørestol standser uden nogen indlysende grund, skal du tjekke, at hovedafbryderen ikke er slået fra. Hovedafbryderen er placeret foran på batterikassen (ved ladestikket).

Tjekliste

Hvis din el-kørestol ikke fungerer som den skal, bør du tjekke følgende:

- At den er tændt.
- At alle stik og forbindelser sidder som de skal.
- At batterierne er fuldt opladede.
- At frihjulsfunktionen er deaktiveret.

Hvis frihjulsfunktionen er blevet aktiveret, mens el-kørestolen har været tændt, kan el-kørestolen ikke køre, før tændingen har været slået fra og til igen.

Kontakt din Seniorland forhandler, hvis el-kørestolen ikke kører, efter du har tjekket disse ting.

Hvis en systemfejl opstår, kan du ved at tælle antal af blink i batteri displayet finde fejlen. På næste side er en liste med mulige fejlmeddelser. Tjek listen inden du kontakter din lokale Seniorland forhandler.

Find det nummer der matcher antal blink i batteri indikatoren og følg instruktionerne.

Forsætter problemet efter du har checket beskrivelsen, skal du kontakte Seniorland.

Batteri indikator	Mulig fejlmelding
1 blink	Mulig stall timeout function eller brugerfejl. Før joystick til neutral position og prøv igen
2 blink	Genopladning af batteri eller dårlig forbindelse til batteret. Tjek forbindelsen til batteriet. Hvis forbindelsen til batteriet er ok, prøv da at oplade dette.
3 blink	Motor i venstre side har dårlig forbindelse. Tjek forbindelsen og kabel til venstre motor.
4 blink	Motor i højre side har dårlig forbindelse. Tjek forbindelsen og kabel til højre motor.
5 blink	Venstre parkeringsbremse fejl. Tjek parkeringsbremse og kabel.
6 blink	Højre parkeringsbremse fejl. Tjek parkeringsbremse og kabel.
7 blink	Joystick fejlmelding. Tjek joystick signal kabel, udskift evt. Joystick.
8 blink	Fejl i kontrolenhed. Tjek forbindelse og ledninger. Udskift evt. Power Module.
9 blink	Joystick kommunikations fejl. Tjek for følgende: Lavt batteri, joystick forbindelse og ledninger, slidte motor børster, udskift joystick.
10 blink	Ukendt fejl. Tjek alle tilslutninger og ledninger. Kontakt din locale Seniorland forhandler
11 blink	Forkert styreenhed monteret.

Lås/oplåsning af styreenhed

Kontrolenheden (Shark joystick) kan låses for at undgå uvedkommendes brug. For at tilkoble låsmekanisme, skal en sekvens af tryk og bevægelse af joystick udføres, se beskrivelse nedenfor.

Låse kontrolenhed:

- Når kontrolenhed er tændt, tryk og hold on/off knappen nede i 4 sekunder.
- Displayet vil nu slukke.
- Alle led i displayet vil blinke kortvarigt og der vil komme en kort lyd fra hornet.
- Elkørestolen er nu låst.

Oplåsning kontrolenhed:

- Tryk på on/off knappen for at tænde kontrolenhed. Hastighedsindikatoren vil køre op og ned.
- Alle led lamper vil blinke kortvarigt og batteriindikator vil blinke stigende fra højre til venstre.
- Tryk på horn knappen 2 gange inden nedtælling er færdig (ca. 10 sekunder).
- El-kørestolen er nu klar til brug.

SLEEP MODE: Efter et stykke tid hvor joystick ikke aktiveres, vil dette automatisk slukke.

Dette vil dog ikke ske når der programmeres med joysticket. Når Wakeup indstilling er aktiveret "joystick og knap", tryk da en vilkårlig knap og systemet vil forlade sleepmode.

EMI advarsel

Shoprider® el-kørestole kan være følsomme over for elektromagnetisk interferens (EMI), hvilket er en slags forstyrrende elektromagnetisk energi (EM), som udgår fra f.eks. radiostationer, TV-stationer, amatørradio-sendere, kombinerede modtager/sender radioer og mobiltelefoner. Forstyrrelsen fra radiobølgerne kan forårsage, at el-kørestolen udløser bremserne, kører af sig selv eller kører i forkerte retninger. Det kan ligeledes gøre permanent skade på el-kørestolens styresystem. Generelt kan kilderne til elektromagnetisk interferens inddeles i 3 typer:

1. Håndholdte modtagere/sendere, som har antennen monteret direkte på enheden. F.eks. amatørradio-bånd (CB radioer), walkie talkies, sikkerheds-, brand- og politi-modtagere/sendere, mobiltelefoner og øvrige personlige kommunikationsapparater.

NB! Nogle mobiltelefoner og lign. udsender signaler, når de er TÆNDT, selv om de ikke er i brug.

2. Mellemdistance mobile modtagere/sendere, så som dem, der bruges i politibiler, brandbiler, ambulancer og taxier. Her er antennen som regel monteret udvendigt på køretøjet.

3. Langdistance modtagere/sendere, så som radio/TV antennemaster og amatørradioer.

NB! Øvrige typer af håndholdte apparater, så som trådløse telefoner, bærbare computer, AM/FM radioer, fjernsyn, CD-afspillere og kassettebåndoptagere, samt mindre apparater, så som elektriske barbermaskiner og føntørre, udgør, så vidt vides, ingen problemer i forhold til el-kørestolen.

El-kørestol Elektromagnetisk Interferens (EMI)

Idet elektromagnetisk energi hurtigt bliver kraftigere, når du nærmer dig en antenne, skal du være særligt opmærksom på håndholdte radiobølgekilder. Du kan let utilsigtet komme til at udsætte din el-kørestols styresystem for elektromagnetisk energi, når du bruger disse apparater. Dette kan påvirke el-kørestolens bevægelser og bremser. Du bør derfor være opmærksom på nedenstående liste som er anbefalet, ift. at undgå problemer med el-kørestolens styresystem.

ADVARSLER

1. Betjen ikke håndholdte sendere/modtagere, så som Walkie talkies/CB radioer, og tænd ikke personlige kommunikationsapparater, så som mobiltelefoner, når el-kørestolen er startet.
2. Hold øje med radio/TV sendemaster og undgå at komme i nærheden af dem.
3. Oplever du, at el-kørestolen bevæger sig i en utilsigtet retning eller at bremserne udløses, skal du slukke el-kørestolen.
4. Hvis du påsætter udstyr eller komponenter eller på anden måde ændrer på el-kørestolen, kan den blive ekstra følsom over for EMI.

NB! Det er ikke let at vurdere el-kørestolens generelle immunitet.

5. Indberet alle utilsigtede bevægelser eller bremsereaktioner til din Shoprider® forhandler, og anfør, om der er EMI-kilder i nærheden.

ADVARSEL: Producenten og importøren af el-kørestolen er ikke ansvarlig for skader, der er opstået i forbindelse med ukorrekt eller usikker brug af el-kørestolen.

Tekniske specifikationer

Modelnavn 888WNLD		
Dimensioner: L ¹ x B x H	mm	1215 x 670 x 1175
Max. brugervægt (på jævnt underlag)	Kg	136
Totalvægt (m/dobbelt batteripakke og sæde)	Kg	126
Motor effekt	Watt	600x2
Forhjul/baghjul	Tommer	9/16
Batterikapacitet	_V_Ah x stk.	12V -U135/36 Ah x 4
Lader	V_Amp	Off Board, 5 amp
Max. hastighed	km/t	9-10
Rækkevidde ³ per opladning (batterikapacitet)	Km	26-28
Venderadius	mm	1050

FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER I SPECIFIKATIONERNE UDEN FORUDGÅENDE VARSEL

1. Inklusive antitip-hjulene
2. Hvis førerens vægt overstiger scooterens vægt, skal farten sættes ned, når du drejer.
3. Den reelle kørerækkevidde varierer i forhold til:
 - a) Førerens vægt
 - c) Batteriernes tilstand
 - d) Opladertype
 - e) Omgivende temperatur
 - f) Køremåde
 - g) Underlag
 - h) Vindhastighed
 - i) Osv.

Ansvarsfraskrivelse

Tillykke med din nye el-kørestol.

Denne el-kørestol må ikke anvendes af personer med fysiske begrænsninger, som kan forhindre brugeren i at betjene el-kørestolen sikkert. Shoprider/Seniorland fraskriver sig ethvert ansvar for personskader eller tingskader, som er opstået på grund af ukorrekt eller usikker brug af firmaets produkter. Mekaniske eller elektriske defekter vil blive behandlet som eventualforpligtelser.

Reklamationsretten er kun gældende, når der er anvendt originale Shoprider dele. Enhver ændring af el-kørestolen, med mindre den er godkendt og autoriseret af Shoprider, vil automatisk resultere i, at reklamationsretten bortfalder. Reklamationsretten omfatter ikke forbrugsprodukter eller tredjepart.

De gældende retningslinjer er ment som en støtte til dig, således at du kan betjene din el-kørestol på en sikker måde. Hvis du har spørgsmål om korrekt betjening af el-kørestolen, bedes du kontakte din autoriserede Seniorland forhandler.

Seniorlands stempel

Serienr: _____

KONTAKT

Før du kontakter Seniorland bedes du have følgende information klar:

- El-kørestol model – se forside på brugervejledning
- Fakturanummer

Kontakt os på Tlf: 70 27 29 24 eller på e-mail: kundeservice@seniorland.dk

Historien om Shoprider® el-scootere, Minibiler og el-kørestole

Seniorland er eneforhandler i Danmark af el-scootere, Minibiler og el-kørestole af mærket Shoprider®. Vores el-scootere, Minibiler og el-kørestole produceres af den internationalt anerkendte el-scooter producent, Shoprider®, som er den europæiske afdeling af Taiwans førende eksport producent inden for el-køretøjer til medicinsk brug. Pihsiang Machinery MFG. Co., Ltd producerer, udover el-scootere, også Minibiler, elektriske kørestole samt reservedele og meget andet. Pihsiang Machinery MFG. Co., Ltd producerede sin første el-scooter i 1978 og deres produkter har gennem årene vundet en lang række priser for deres høje kvalitet. I dag sælges Shoprider® el-scootere over hele verden.

Samarbejdet med Shoprider® gør, at vi har et stort udvalg af el-scootere, Minibiler, el-kørestole og reservedele og tilbehør, som passer til forskellige behov. Alle Shoprider® el-scootere og Minibiler har følgende certificeringer:

EC EN 12485 / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 14001.

SHOPRIDER®