



Brugervejledning

Læs brugervejledningen før du tager din el-scooter i brug



Italian 7A

Indhold

Introduktion	1
Funktioner	2
Råd om sikkerhed	3
Justering og indstilling	5
Mærkater og advarsler	6
Kontrolpanel	7
Frihjulsfunktion	8
Transport og opbevaring	9
Kom i gang med at køre på din el-scooter	10
Tips til betjeningen af din el-scooter	11
Batterier og batteriopladning	12
Vedligeholdelse	14
Fejlfinding	15
EMI advarsel	16
Tekniske specifikationer	18
Ansvarsfraskrivelse	19
Kontakt Seniorland	20
Historien bag	21




Introduktion

Tillykke med din nye Shoprider® scooter. Din Shoprider® scooter er innovativ og har et patenteret design. Scooteren er perfekt til steder, hvor der ikke er megen plads, både indenfor og udenfor. Transaksler og elektromagnetiske bremses gør, at scooteren kører sikkert og effektivt. Denne Shoprider® scooter er designet til personer, der er bevægelseshæmmede.

Læs venligst denne Brugervejledning omhyggeligt, før du bruger din scooter og vær sikker på, at du forstår alle instruktionerne.

FUNKTIONER

1. Styr
2. Aftageligt sæde
3. Flytbare armlæn
4. Drejbart sæde / udløserarm
5. Ladestik
6. Transportbælt dobbeltbatteri
7. Massive dæk
8. Måtte
9. Håndtag
10. For-kofanger
11. Drejehåndtag til indstilling af styrhøjde
12. Aftagelig kurv
13. Bag-kofanger

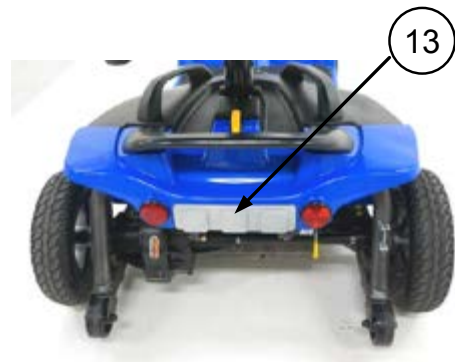

RÅD OM SIKKERHED

- Medtag aldrig passagerer.
- Dette produkt er beregnet til at kunne støtte og hjælpe dig. For din egen sikkerheds skyld beder vi dig derfor læse brugervejledning, før du tager scooteren i brug. Hvis du er i tvivl, bedes du kontakte din leverandør.
- Må ikke bruges på stigninger over 6 grader (10% hældningsgrad).
- Hvis din vægt overstiger scooterens vægt, skal du sætte farten ned, når du drejer.
- Stå ikke på eller af scooteren, med mindre bremsen er aktiveret og scooteren er slukket.
- Sluk ikke scooteren under kørsel.
- Kør ikke på scooteren, hvor det ikke er lovligt eller sikkert at gå.
- Kør ikke over kanter, der er højere end 20 mm. Scooteren kan vælte og dermed forårsage personskader eller skader på scooteren. Skal du køre over kanter, der er lavere end 20 mm, skal du holde scooteren i en 90 graders vinkel og ved lav hastighed.
- Undlad at drikke eller tale i mobiltelefon, når du kører på din scooter.
- Overskrid ikke den vejledende brugervægt. En overskridning af den vejledende brugervægt kan forårsage personskade, og reklamationsretten bortfalder.
- Hold altid dine fødder på scooteren, når du kører.
- Vær sikker på, at du er fysisk i stand til at køre scooteren. Kontakt din læge, hvis du er i tvivl.
- Sænk altid farten og kør forsigtigt på ujævne underlag.
- Har du balanceproblemer, skal du øve dig i at stå af og på scooteren sammen med sundhedspersonale.
- Kør ikke på scooteren uden antitip-hjul monteret.
- Kør ikke på rulletrapper med scooteren. Der kan ske alvorlige skader.
- Kør ikke scooteren på stigninger, hvorpå der er olie, vand eller is.
- Løft ikke scooteren i sædet, styret, den bageste del af karrosseriet eller i nogen af de aftagelige dele. Det kan forårsage personskade eller skade på scooteren.
- Anvend ikke uoriginale dele eller udstyr, som ikke er godkendt af producenten.
- Fjern nøglen fra tændingen, før du står på eller af scooteren. Dette sikrer, at scooteren er slukket og ikke kan køre af sig selv. Generelt skal nøglen altid fjernes fra tændingen, når scooteren ikke er i brug. Dette vil forhindre uøvede eller uautoriserede personer i at køre den.
- Forbind ikke andre komponenter til scooterens batteri eller ladestik. Dette kan forårsage personskade samt skade på komponenten eller scooteren.
- Vær sikker på, at styret er korrekt justeret og låst for at undgå personskade eller skade på scooteren.
- Det er ikke tilladt at sidde på scooteren under transport med et andet køretøj. Dette kan forårsage skader.
- Brug ikke scooteren, når det regner eller i nærheden af en bruser eller i et fugtigt badeværelse. Regn eller fugt kan forårsage funktionsfejl i scooterens elektriske system, og scooteren kan ruste.
- Læn dig ikke op af styret og træk ikke i styret, når du står af eller på scooteren. Dette kan forårsage skader.
- Betjen ikke scooteren og tænd ikke scooteren, mens den lader.
- Hvis en af hjulboltene løsner sig, skal den udskiftes med en ny fra en autoriseret leverandør og fastspændes med et tilspændingsmoment på 240 ± 5 kg-cm sammen med Loctite 271 låsevæske (el. lign.).
- Oplad batterierne dagligt efter brug.

(Fortsat fra forrige side)

- Fjern laderen fra scooteren efter opladning.
- Der må ikke være løse ledninger under kørslen.
- Tjek resterende batteritid inden kørsel.
- Oplad altid batterierne i ventilerede omgivelser.
- Hvis scooteren er kørt igennem eller er sunket ned i dybt vand, skal du slukke for strømmen og kontakte din autoriserede Seniorland forhandler for afhjælpning.
- Sluk scooteren, når den ikke er i brug og før opladning, samt inden fjernelse og isætning af batterier, da der ellers kan ske skade på scooteren eller andre ting i nærheden.
- Brugen af scooteren må ikke overskride specifikationerne i denne brugervejledning.
- Brug ikke den fingerbetjente hastighedsregulering før du har tændt scooteren, da du ellers vil være nødt til at slukke og tændt scooteren igen, før den kan betjenes.

JUSTERINGER OG INDSTILLINGER

Justering af styrets vinkel (Fig. 1)

Nederst på styret er der en fingerskrue.

Drej fingerskruen mod uret for at løsne styret og vælg den ønskede vinkel på styret. Drej fingerskruen med uret for at låse styret i den ønskede position.



Fig. 1

Fjernelse af sædet (Fig. 2)

Læg ryglænet ned mod sædet.

Løft håndtaget under sædet for at løfte sædet op og ud af sædepinde.



Fig. 2

Justering af bredden mellem armlæn (Fig. 3)

På undersiden af ryglænet er der to fingerskruer til armlænen, én på hver side.

Drej fingerskruen mod uret for at løsne armlænen. På denne måde kan du justere bredden mellem armlænen eller helt fjerne armlænen. Når armlænen er i den ønskede position, skal du dreje fingerskruerne med uret for at låse dem fast.

Brug ikke scooteren uden armlæn fastspændt.

Justering af armlæn (Fig. 3)

Armlænen kan justeres eller fjernes helt ved at løsne fingerskruen.

Dette kan lette sidevætsforflytning.



Fig. 3


Mærkater og advarsler




Advarselsmærkat



Advarselsmærkat

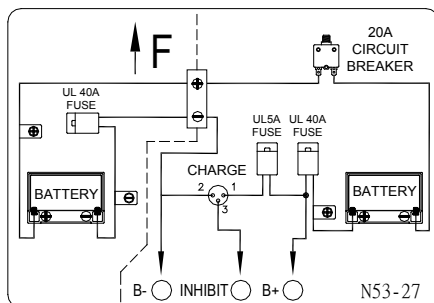

Batteriledningsdiagram (til 10Ah)

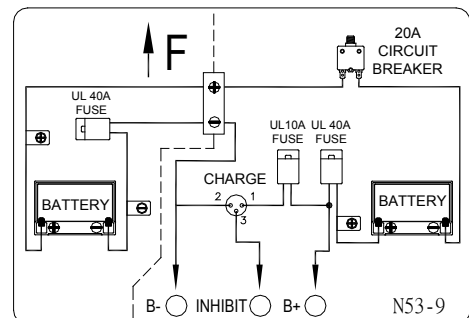

Batteriledningsdiagram (til 22Ah)



Frehjuls symbol

Kontrolpanel



Fig. 4

(1) Hastighedsregulering

Med hastighedsreguleringen kan du sætte din hastighed mellem 1 (minimum) og 10 (maksimum). Drej knappen mod uret til for at nedsætte hastighed, og med uret mod for at øge hastighed.

(2) LED Batteri-indikator

Indikatoren er markeret med "E" for tom (empty), til "F" for fuld. For at illustrere det, er Indikatoren forsynet med farver:

Rød (skal oplades straks)

Gul (skal oplades hurtigst muligt)

Grøn (klar til brug).

(3) Horn

Den gule knap aktiverer hornet.

(4) Tænding til/fra

Sæt nøglen i på højre side af styret. Drej nøglen, og farveindikatoren vil vise batteriniveauet. Der vil være en kort forsinkelse, fra scooteren tændes, og til du kan køre, da styreboksen skal tjekke kredsløbet.

(5) Fingerbetjening af kørselsretninger og hastighed

Den venstre fingerbetjente knap styrer kørselsretningen bagud og den højre styrer kørselsretningen fremad. Det tryk, du påfører den fingerbetjente knap, styrer scooterens hastighed. Slip de fingerbetjente knapper, og scooteren vil langsomt stoppe, og den elektromagnetiske bremse vil blive aktiveret.

Elektromagnetisk bremse

Bremsen aktiveres automatisk, når de fingerbetjente knapper slippes. Der er en mindre forsinkelse, når scooteren decelererer. Dette gør, at scooteren stopper blødt.

Frihjulsfunktion


Frihjulshåndtaget (gult håndtag) sidder ved højre baghjul. Løft håndtaget op for at koble motoren fra. Nu kan scooteren skubbes. Skub håndtaget ned for at tilkoble motoren igen.

ADVARSEL! Deaktiver altid frihjulsfunktionen efter brug, ellers kan det forårsage skader.

Antitip-hjul

Antitip-hjul er placeret bag på scooteren. Scooteren bør ikke anvendes, hvis antitip ikke er påmonteret plads.

Producenten og importøren af scooteren er ikke ansvarlig for skader som følge af ukorrekt brug eller misbrug af scooteren.

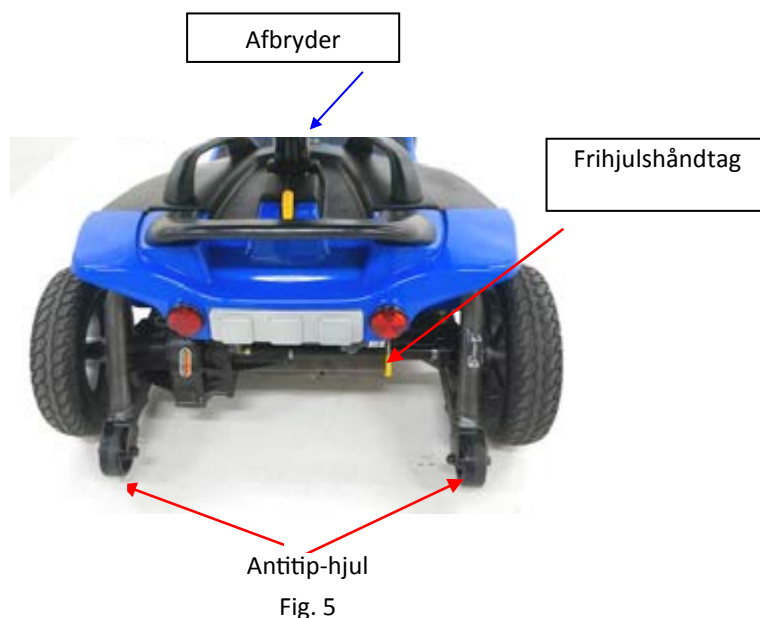

Transport og opbevaring

Scooteren er designet til hurtigt og let at kunne skilles ad, således, at den nemt kan transporteres eller opbevares. Følg disse enkle retningslinjer, når den skal skilles ad:

Demontering (Fig. 6 & 7)

1) Fjern kurven foran: Løft kurven op og af.

2) Læg ryglænet ned og fjern sædet: Træk det gule håndtag op og løft sædet op og af.

3) Fjern batterikasserne: Fjern først batterikassen i venstre side og dernæst i højre i side.

Bemærk: 1. Højre batterikasse skal monteres før den venstre. 2. De to batterikasser skal tilsluttes samtidigt og monteres korrekt på scooteren før kørsel eller opladning.

4) Læg styret ned og lås det: Løft det gule håndtag opad og til siden for at låse styringen og forhjulene. Løsn styrjusteringshåndtag, sænk styret og spænd justeringshåndtaget.

5) Skil den bageste sektion fra den forreste: Udløserhåndtaget (gult) er placeret bagest på scooteren ved siden af frihjulshåndtaget. Skub håndtaget over på "detach" og skil den bageste sektion fra den forreste.



Figur 7



Figur 6



Forstørret billede styrlås

Kom i gang med at køre på din el-scooter

Kom godt i gang

- Vælg et plant område med masser af plads.
- Sæt dig på scooteren, enten ved at løfte armen og glide ind på sædet eller ved at dreje sædet udad og efterfølgende dreje sædet tilbage, så det er lige ud for styret.
- Juster styret og sædet som tidligere anvist.

Begynd at køre

- Vær sikker på, at du sidder godt.
- Drej nøglen, så den står på ON.
- Hastighedsregulering bør stå på 1 eller 2.
- Tryk den fingerbetjente knap ved din højre hånd ned, og scooteren vil langsomt bevæge sig fremad. Jo hårdere du trykker, jo hurtigere kører scooteren. Dog når den kun op på det maksimale hastighedsniveau, du selv har valgt.
- Slip knappen, og scooteren vil stoppe langsomt, og den magnetiske bremse bliver aktiveret.

At styre

Det er let at styre scooteren. Du skal sikre dig, at du har plads nok, når du skal dreje, således at hjulene ikke støder på noget undervejs. Når du skal styre igennem snævre åbninger, så som døråbninger, eller når du skal vende, skal du vende styrets håndtag mod det sted, du vil hen og langsomt give gas. Scooteren drejer meget skarpt, men kører stadig fuldstændigt stabilt, så længe farten ikke er for høj.

At bakke

Før du bakker, skal du sikre dig, at der ikke er forhindringer i området bag dig. Indstil til lav hastighed, før du begynder at bakke. Tryk på den venstre fingerbetjente knap og styr uden om hjørner og forhindringer.

At stå af

Før du står af scooteren, skal du sikre dig, at nøglen er drejet til OFF.

FORSIGTIG: Vær forsigtig, når du står af eller på scooteren og sikrer dig, at hverken styr eller fodhviler anvendes som støtte.

Tips til betjening af din el-scooter

Opkørsler og ramper

Stabiliteten i din scooter er styret af flere faktorer, så som sædepositionen, hældningsvinkel samt din højde og vægt. Når du nærmer dig en stigning, skal du gøre det direkte på – aldrig i en skæv vinkel. Undgå desuden at dreje undervejs. Når du skal ned af en rampe eller nedkørsel, skal du sætte hastighedsregulatoren lavt. Det vil sikre, at du får en sikker og kontrolleret nedkørsel. Når du slipper fingerbetjente knapper, vil scooteren bremse langsomt.

Sikker opkørselsvinkel


Følg altid retningslinjerne for, hvordan vinklen skal være, når du køre op af en rampe eller opkørsel, se figur 9.

Forsigtig – Drej aldrig nøglen på OFF, når scooteren er i bevægelse.

Græs og grus

Hvis du følger de retningslinjer, vi har givet dig, vil din scooter klare mange forskellige underlag. Dog bør du undgå højt græs, løst grus og sand.

NB: Undgå at bruge scooteren, når det regner eller på våde underlag. Det kan få motoren til at sætte ud.

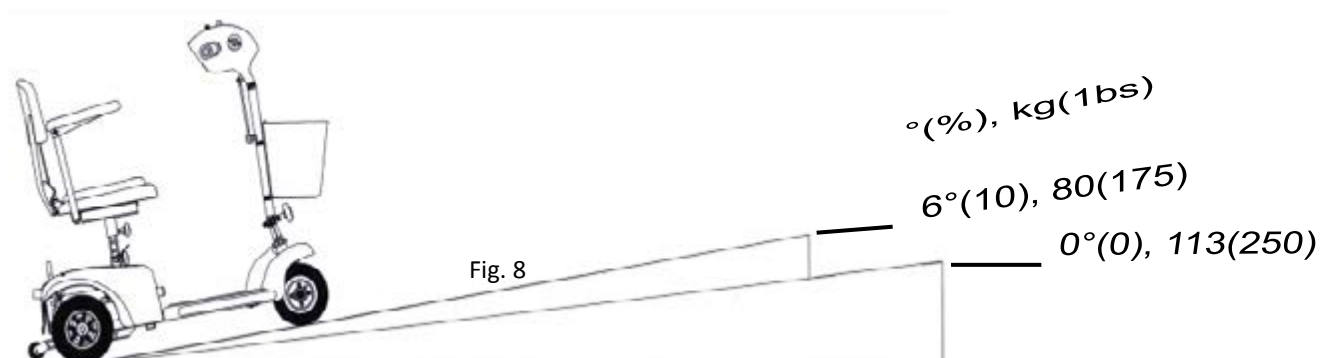

(Enkelt bruger)

Her vises vinkler og vægt for denne scooter for at illustrere, hvad der er sikkert for både bruger og udstyr. Hvis disse parametre ikke overholdes, kan scooteren blive usikker og få problemer med det elektriske system.

Batterier og batteriopladning

Shoprider® scooteren er forsynet med vedligeholdelsesfrie, lukkede blybatterier. Batteriernes præstation kan påvirkes af temperatur, underlag, batteriets tilstand, batteritypen, batteriopladertypen, brugerens vægt, vindhastighed, osv. Batteri-indikatoren er kun vejledende og er mest effektiv, når scooteren kører – det korrekte niveau vises kun under kørsel.

- Når scooteren stopper, kan batteri-indikatoren vise, at den er fuldt opladet.
- En aktiv bruger kan bruge op til 30% af batterikapaciteten eller mere pr. dag.
- Inaktive brugere bruger måske kun 50% af batterikapaciteten på en uge.
- I begge tilfælde bør batteriet oplades over natten.
- Udskift altid batterierne med to identiske batterier med samme kemi, amperetimer og kapacitet. Batterierne skal udskiftes sætvis og på samme tid, og altid af din autoriserede Seniorland forhandler.

Batterioplader

Den leverede batterioplader er kun egnet til din scooter og kan ikke anbefales anvendt på andre produkter. Brug kun den lader, der er leveret sammen med din scooter. Andre typer ladere kan gøre permanent skade på din scooters batterier og vil medføre at reklamationsretten bortfalder. For al øvrig information omkring laderen og instruktioner om drift og brug, henviser vi til den brugervejledning, der ligger i den kasse, som laderen blev leveret i.

Første gang du bruger scooteren

Før du bruger din scooter første gang, skal du lade batterierne helt op (se afsnittet om opladning). Opladning kan tage op til 12 timer. Når du lader batterierne fuldt op, inden du bruger scooteren første gang, vil batteriernes ydeevne højnes. I modsat fald kan det forårsage skader.

Opladning

For at oplade batterierne skal du forbinde det trebenede hanstik med det trebenede hunstik på batterikassen. Tilslut vekselstrømsledningen i stikdåsen og den anden ende i laderen

(tobenet). Se venligst beskrivelsen af batteri-indikatoren, som er baseret på ladestatus, i brugervejledning. Når batterierne er fuldt opladede, skal du tage stikket ud af stikdåsen og det trebenede stik ud af batterikassen.

ADVARSEL: Brug kun original og godkendt Shoprider® lader!

Denne lader må kun bruges indendørs. MÅ IKKE udsættes for regn eller fugt. Lad ikke laderen sidde i scooteren's ladestik, hvis laderen ikke er tilsluttet stikkontakt.

Batteri information

1. Bland ikke forskellige batterier og ledninger. De to batterier skal være ens, når de tilsluttes.
2. De to batterikasser skal tilkobles samtidigt og installeres korrekt på scooteren før kørsel eller opladning
3. Oplad nye batterier 100% inden brug.
4. Det anbefales at oplade batterierne 8-14 timer efter dagligt brug.
5. Hvis scooteren ikke bruges så ofte (én gang om ugen eller mindre), skal batterierne lades op én gang om ugen i 12-14 timer.
6. Oplad ikke batterierne i mere end 24 timer per gang.
7. Batterier, som kommer under minimumsspændingen, fordi de ikke bliver ladet op, kan ikke genoplades igen.
8. Hvis du planlægger ikke at bruge din scooter i en længere periode, anbefales det, at du lader batterierne helt op og efterfølgende afmonterer batterierne før opbevaring. Opbevar scooteren et tørt og varmt sted. Opbevar aldrig batterierne, hvor der er risiko for ekstreme temperaturer. Forsøg aldrig at lade et frossent batteri op. Et koldt eller frossent batteri bør varmes op i adskillige dage, før det kan oplades.

Vedligeholdelse

Smøring

Følgende dele bør smøres med en let olie el. lign. smøremiddel hvert halve år:

- Sædepindens drejeaksel.
- Sædejusteringen.
- Hjullejer.
- Drivaksel

FORSIGTIG – ANVEND IKKE WD40 TIL SMØRING AF DELE!! SMØR IKKE TRANSAKSELEN/GEARKASSEN! Får du problemer, bedes du kontakte Seniorland.

Rengøring

Din scooter bør rengøres efter behov, men som med alt andet elektrisk udstyr, skal du være yderst forsigtig med brug af vand, således at du ikke beskadiger scooterens følsomme dele.

Læs følgende advarsler:

- Brug kun en blød, fugtig klud.
- Brug aldrig en vandslange til at rengøre din scooter med.
- Brug kun milde rengøringsmidler.

Dæk

Da dine dæk er massive, er der ingen grund til at bekymre sig om dæktryk.

Fejlfinding

Hovedafbryder

Din scooter er udstyret med det nyeste inden for elektroniske styresystemer, som er programmerede til at beskytte det elektriske system fra u hensigtsmæssig overbelastning. Som en ekstra sikkerhed har scooteren en hovedafbryder. Hvis din scooter standser uden nogen indlysende grund, skal du tjekke, at hovedafbryderen ikke er slået fra. Hovedafbryderen er placeret foran på batterikassen (se fig. 5 side 8).

Tjekliste

Hvis din scooter ikke fungerer som den skal, bør du tjekke følgende:

- At den er tændt.
- At alle stik og forbindelser sidder som de skal.
- At batterierne er fuldt opladede.
- At frihjulsfunktionen er deaktiveret.

Hvis frihjulsfunktionen er blevet aktiveret, mens scooteren har været tændt, kan scooteren ikke køre, før tændingen har været slået fra og til igen.

Kontakt dit lokale Seniorland, hvis scooteren ikke kører, efter du har tjekket disse ting.

EMI advarsel

Shoprider® scootere kan være følsomme over for elektromagnetisk interferens (EMI), hvilket er en slags forstyrrende elektromagnetisk energi (EM), som udgår fra f.eks. radiostationer, TV-stationer, amatør radiosendere, kombinerede modtager/sender radioer og mobiltelefoner. Forstyrrelsen fra radiobølgerne kan forårsage, at scooteren udløser bremserne, kører af sig selv eller kører i forkerte retninger. Det kan ligeledes gøre permanent skade på scooterens styresystem. Generelt kan kilderne til elektromagnetisk interferens inddeles i 3 typer:

1. Håndholdte modtagere/sendere, som har antennen monteret direkte på enheden. F.eks. amatør radio-bånd (CB radioer), walkie talkies, sikkerheds-, brand- og politi-modtagere/sendere, mobiltelefoner og øvrige personlige kommunikationsapparater.

NB! Nogle mobiltelefoner og lign. udsender signaler, når de er tændt, selv om de ikke er i brug.

2. Mellemdistance mobile modtagere/sendere, så som dem, der bruges i politibiler, brandbiler, ambulancer og taxier. Her er antennen som regel monteret udvendigt på køretøjet.

3. Langdistance modtagere/sendere, så som radio/TV antennemaster og amatør radioer.

NB! Øvrige typer af håndholdte apparater, så som trådløse telefoner, bærbare computer, AM/FM radioer, fjernsyn, CD-afspillere og kassettebåndoptagere, samt mindre apparater, så som elektriske barbermaskiner og føntørre, udgør, så vidt vides, ingen problemer i forhold til scooteren.

Scooter Elektromagnetisk Interferens (EMI)

Idet elektromagnetisk energi hurtigt bliver kraftigere, når du nærmer dig en antenne, skal du være særligt opmærksom på håndholdte radiobølgekilder. Du kan let utilsigtet komme til at udsætte din scooters styresystem for elektromagnetisk energi, når du bruger disse apparater. Dette kan påvirke scooterens bevægelser og bremses. Du bør derfor være opmærksom på nedenstående liste som er anbefalet, ift. at undgå problemer med scooterens styresystem.

ADVARSLER

1. Betjen ikke håndholdte sendere/modtagere, så som Walkie talkies/CB radioer, og tænd ikke personlige kommunikationsapparater, så som mobiltelefoner, når scooteren er tændt.
2. Hold øje med radio/TV sendemaster og undgå at komme i nærheden af dem.
3. Oplever du, at scooteren bevæger sig i en utilsigtet retning eller at bremserne udløses, skal du slukke scooteren.
4. Hvis du påsætter udstyr eller komponenter eller på anden måde ændrer på scooteren, kan den blive ekstra følsom over for EMI.

NB! Det er ikke let at vurdere scooterens generelle immunitet.

5. Indberet alle utilsigtede bevægelser eller bremsereaktioner til din® Seniorland forhandler, og anfør, om der er EMI-kilder i nærheden.

ADVARSEL: Producenten og importøren af scooteren er ikke ansvarlig for skader, der er opstået i forbindelse med ukorrekt eller usikker brug af scooteren.

Tekniske specifikationer

Modelnavn Italian 7A		
Dimensioner: L ¹ x B x H	mm	1110 x 540 x 925
Diameter, forhjul	stk. x tommer"	2x8
Diameter, baghjul	stk. x tommer"	2,8
Max. brugervægt (på jævnt underlag)	Kg	113
Totalvægt (m/dobbelt batteripakke, kurv og sæde)	Kg	43 (14Ah) / 50 (22 Ah)
Vægten på den tungeste del (fronten)	Kg	15
Batterikapacitet	_V_Ah x stk.	12V
Lader	V_Amp	AC 220/110 V / DC 24V 2A
Motorens udgangseffekt (kun referenceværdi)	Watt	300
Max. hastighed	Km/t	6~7
Sikker stigningsvinkel	Grad(%)	Fig. 8
Rækkevidde ³ per opladning (batterikapacitet)	Km	12~14 (14Ah)/ 20-22 (22Ah)
Venderadius	mm	1170

FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER I SPECIFIKATIONERNE UDEN FORUDGÅENDE VARSEL

1. Inklusive antitip-hjulene
2. Hvis førerens vægt overstiger scooterens vægt, skal farten sættes ned, når du drejer.
3. Den reelle kørerækkevidde varierer i forhold til:
 - a) Førerens vægt
 - c) Batteriernes tilstand
 - d) Opladertype
 - e) Omgivende temperatur
 - f) Køremåde
 - g) Underlag
 - h) Vindhastighed
 - i) Osv.

Ansvarsfraskrivelse

Tillykke med din nye scooter.

Denne scooter må ikke anvendes af personer med fysiske begrænsninger, som kan forhindre brugeren i at betjene scooteren sikkert. Shoprider/Seniorland fraskriver sig ethvert ansvar for personskader eller tingskader, som er opstået på grund af ukorrekt eller usikker brug af firmaets produkter. Mekaniske eller elektriske defekter vil blive behandlet som eventualforpligtelser.

Reklamationsretten er kun gældende, når der er anvendt originale Shoprider dele. Enhver ændring af scooteren, med mindre den er godkendt og autoriseret af Shoprider, vil automatisk resultere i, at reklamationsretten bortfalder. Reklamationsretten omfatter ikke forbrugsprodukter eller tredjepart.

De gældende retningslinjer er ment som en støtte til dig, således at du kan betjene din scooter på en sikker måde. Hvis du har spørgsmål om korrekt betjening af scooteren, bedes du kontakte din autoriserede Seniorland forhandler.

Seniorlands stempel

Serienr: _____

KONTAKT

Før du kontakter Seniorland bedes du have følgende information klar:

- Scooter-model – se forside på brugervejledning
- Fakturanummer

Kontakt os på Tlf: 70 27 29 24 eller på e-mail: kundeservice@seniorland.dk



Historien om Shoprider® el-scootere og Minibiler

Seniorland er eneforhandler i Danmark af el-scootere og Minibiler af mærket Shoprider®. Vores el-scootere og Minibiler produceres af den internationalt anerkendte el-scooter producent, Shoprider®, som er den europæiske afdeling af Taiwans førende eksport producent inden for el-køretøjer til medicinsk brug. Pihsiang Machinery MFG. Co., Ltd producerer, udover el-scootere, også Minibiler, elektriske kørestole samt reservedele og meget andet. Pihsiang Machinery MFG. Co., Ltd producerede sin første el-scooter i 1978 og deres produkter har gennem årene vundet en lang række priser for deres høje kvalitet. I dag sælges Shoprider® el-scootere over hele verden.

Samarbejdet med Shoprider® gør, at vi har et stort udvalg af el-scootere, reservedele og tilbehør, som passer til forskellige behov. Alle Shoprider® el-scootere og Minibiler har følgende certificeringer:

EC EN 12485 / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 14001.

SHOPRIDER®